

CARE FLOW UB 500 + UB 500US sterile/unsterile

3-Kammer-Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 500 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beutel. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
500 ml	10 cm	04/01/500/10/GHC	09084990	steril
500 ml	30 cm	04/01/500/30/GHC	12341203	steril
500 ml	50 cm	04/01/500/50/GHC	09085009	steril

Verpackungseinheit: 10 cm: 75 Stück, 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
500 ml	10 cm	04/01/500US/10/GHC	09085015	unsteril
500 ml	30 cm	04/01/500US/30/GHC	12341410	unsteril
500 ml	50 cm	04/01/500US/50/GHC	09085021	unsteril

Verpackungseinheit: 10 cm: 120 Stück, 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück

HMN: 15.25.05.3094
(Art.-Nr. 04/01/500)

HMN: 15.25.05.1118
(Art.-Nr. 04/01/500US)




Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Drei Kammern

Aufgrund der drei Kammern, verteilt sich der Urin im System gleichmäßiger. So lässt sich der Beinbeutel auch im gefüllten Zustand noch diskreter unter der Kleidung tragen.

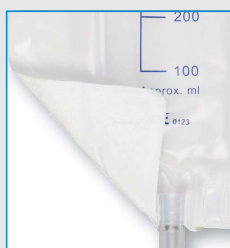

Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 58-62.

Abbildungen können vom Original abweichen