

Medtronic

Beruhigt operieren dank Wärmedecken



Das konvektive Warmluftgerät Calima™ mit Decken für jeden Bedarf

Es ist bekannt, dass eine unbeabsichtigte Hypothermie bei chirurgischen Patient*innen häufig vorkommt und erhebliche Komplikationen nach sich ziehen kann. Ungewärmt können operierte Patient*innen in Allgemeinnarkose bis zu 1,6 °C Körpertemperatur während der ersten Stunde verlieren.¹ Die konvektive Wärmung mit Warmluftgebläsen hat sich als das effektivste Verfahren zur Wärmung von Patient*innen zum Erhalt der Normothermie und zur Vermeidung hypothermiebedingter Komplikationen erwiesen. Noch nie war es so einfach, die Normothermie aufrecht zu erhalten, wie jetzt mit unserem umfassenden Angebot unter und auf dem Körper zu platzierenden Decken, zu denen auch unsere WarmTouch™ Decken gehören.

Das Warmluftgerät Calima™ ist:

Vielseitig

Drei Gebläsestufen und vier Temperatureinstellungen optimieren die Leistung und passen sich an die klinischen Erfordernisse an – und das bei minimalem Betriebsgeräusch.

Kompakt und robust

Das kleine und leichte Gerät lässt sich problemlos aufstellen, bewegen und stabilisieren, wenn es auf einen Wagen, an einer Infusionshalterung oder neben Operierten positioniert wird.

Sicher

Eingebaute Mechanismen helfen bei der genauen Temperaturregelung.

Bedienungsfreundlich

Die Steuerelemente sind leicht zu bedienen und zu warten.

Einfacher Anschluss

Der leichte und flexible Schlauch lässt sich mit sicheren Klemmverbindungen leicht an die Wärmedecke anschließen.

Wir haben Decken für jeden Bedarf

Wählen Sie aus 25 Deckenarten, 19 davon unsteril und 6 steril, die sich für die meisten Eingriffe eignen.

Leistung

Unsere Decken weisen einen speziellen Aufbau und eine gleichmäßigen Mikroperforation für optimale Luftströmung und Wärmeverteilung auf.

Haltbarkeit

Das Polypropylenmaterial entspricht Normen für Kompatibilität und Brennbarkeit, ist weich, robust, leicht und latexfrei. Tests belegen, dass es auch das Abziehen starker Klebebänder ohne Reißen übersteht. Das System ist außerdem dafür ausgelegt, dass die Decken die Patient*innen vom OP bis zum Aufwachraum begleiten.

Sicherheit

Schläuche mit passenden Klemmverbindungen sorgen für eine sichere Fixierung. So kann der Schlauch ohne Beschädigung der Eingangsdichtung entfernt werden. Zu den weiteren Sicherheitsmerkmalen zählen vorkonfektionierte Schnürbänder für die Decken.

Das konvektive Warmluftgerät Calima™*


Technische Daten des Gebläses



Artikelnummer	CCALIMA22
Abmessungen	280 mm × 284 mm × 283 mm
Gewicht	6 kg (13,23 lbs.)
Betriebstemperatur / Einstellungen	Umgebungstemperatur, 38 °C, 43 °C, 45 °C-Boost für 45 Minuten (±1 °C)
Gebläsestufen	Niedrig: 9 m/s Mittel: 13 m/s Hoch: 16 m/s
Alarmer	Hohe Temperatur, Überhitzung, Filterlebensdauer, fehlender Filter
Filterlebensdauer	1000 Stunden
Zertifizierungen	CE0197, IEC 60601-1 3.Ausg.

Abmessungen der Decken


Decken für Erwachsene

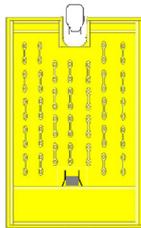

Erwachsene Ganzkörper**

CNOFB2
CSOFB2 (sterile)


ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
110 cm B x 213 cm L
Aufgeblasen
92 cm B x 182 cm L

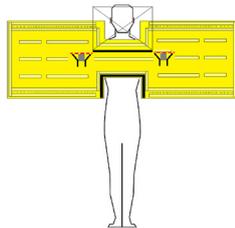

Erwachsene Oberkörper**

CNOUB2
CSOUB2 (sterile)

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
203 cm B x 68 cm L
Aufgeblasen
190 cm B x 55 cm L

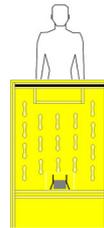

Erwachsene Unterkörper**

CNOLB2
CSOLB2 (sterile)


ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
108 cm B x 150 cm L
Aufgeblasen
86 cm B x 140 cm L



Erwachsene Mehrfachzugang**

CNOMA2
CSOMA2 (sterile)

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
110 cm B x 213 cm L
Aufgeblasen
107 cm B x 202 cm L

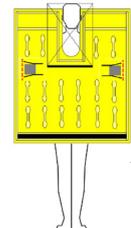


Erwachsene Rumpf mit dualem Port**

CNOTO2
CSOTO2 (sterile)

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
110 cm B x 110 cm L
Aufgeblasen
105 cm B x 99 cm L


Erwachsene Spezialdecken

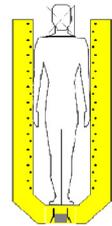

Erwachsene Katheterlabor perforiert

CNOCL2
CSOCL2 (sterile)


ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
87 cm B x 180 cm L
Aufgeblasen
76 cm B x 170 cm L

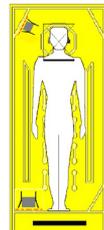

Erwachsene Unterlegdecke

CNUAD2
CSUAD2 (sterile)


ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
96 cm B x 218 cm L
Aufgeblasen
86 cm B x 207 cm L

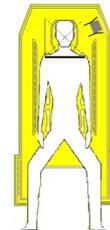

Erwachsene Lithotomie Unterlegdecke

CNULI2
CSULI2 (sterile)

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
103 cm B x 175 cm L
Aufgeblasen
76 cm B x 166 cm L

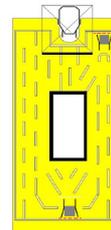

Erwachsene Chirurgischer Zugang**

CNOSA2
CSOSA2 (sterile)

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
110 cm B x 213 cm L
Aufgeblasen
109 cm B x 195 cm L

** Vergleichbare Ausführungen im Deckenstil WarmTouch™ erhältlich

Decken für Kinder und Neugeborene




Kinder Ganzkörper**

CNOPE2
CSOPE2 (sterile)
ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
108 cm B x 150 cm L
Aufgeblasen
105 cm B x 148 cm L




Kinder Unterlegdecke

CNUPE2
CSUPE2 (sterile)
ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
82 cm B x 162 cm L
Aufgeblasen
76 cm B x 157 cm L

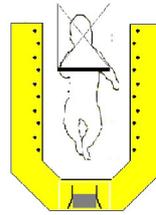

Kinder Schlauch


CNOPT2
ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
87 cm B x 125 cm L
Aufgeblasen
77 cm B x 123 cm L

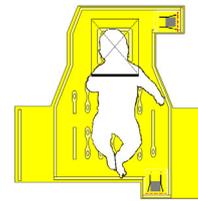

Neugeborene Unterlegdecke

CNUNN2
CSUNN2 (sterile)
ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
107 cm B x 110 cm L
Aufgeblasen
93 cm B x 96 cm L

Sterile Nur Decken

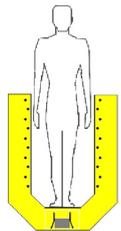

Steril Kardialer Zugang**

CSOCA2
ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
87 cm B x 125 cm L
Aufgeblasen
77 cm B x 123 cm L

** Vergleichbare Ausführungen im Deckenstil WarmTouch™ erhältlich

Jetzt sind Ihre Decke für das konvektive Wärmesystem WarmTouch™ mit dem konvektiven Wärmegerät Calima™ kompatibel.

Decken für das konvektive Wärmesystem WarmTouch™

Abmessungen der Decken



WarmTouch™ Ganzkörperdecke Mehrfachzugang

Einfacher Zugang zu Thoraxdrainagen, Arterien und Pulsüberwachung

5030810

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
102 cm B x 201 cm L
Aufgeblasen
84 cm B x 188 cm L



WarmTouch™ Oberkörperdecke

Duale Eingänge für mehr Flexibilität

5030870

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
208 cm B x 71 cm L
Aufgeblasen
183 cm B x 61 cm L



WarmTouch™ Rumpfdecke

Große Seitenlaschen zum Unterstecken unter den Körper
Duale Eingänge für mehr Flexibilität

5030900

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
132 cm B x 102 cm L
Aufgeblasen
113 cm B x 91 cm L



WarmTouch™ Unterkörperdecke

Präzise, lokalisierte Wärme mit einstellbarer Bandpositionierung

5030880

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
104 cm B x 142 cm L
Aufgeblasen
86 cm B x 132 cm L



WarmTouch™ Kardiologische Decke Steril

Einzigartiges Design, um Luftverteilung an den Füßen zu minimieren

5030860

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
102 cm B x 165 cm L
Aufgeblasen
86 cm B x 135 cm L



WarmTouch™ Decke für chirurgischen Zugang

Einzigartiges Design für abdominale und spinale Eingriffe

5030890

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
102 cm B x 201 cm L
Aufgeblasen
89 cm B x 188 cm L



WarmTouch™ Pädiatrische Decke für die Chirurgie

Für den Gebrauch als Auf- oder Unterlage
Durchsichtige Schädelabdeckung zur Aufrechterhaltung der Schädeltemperatur

5030850

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
63 cm B x 104 cm L
Aufgeblasen
56 cm B x 89 cm L



WarmTouch™ Pädiatrische Ganzkörperdecke

Einfacher Zugang zu Thoraxdrainagen, Arterien und Pulsüberwachung

5030840

ABMESSUNGEN
Nicht aufgeblasen
76 cm B x 145 cm L
Aufgeblasen
69 cm B x 124 cm L

Bestellinformationen

Das konvektive Warmluftgebläse Calima™*

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ANZAHL
CCALIMA22	Gebläse: 220-240 V	1/Karton
CCALIMA221	Gebläse: 220-240 V 6 Meter Schlauch	1/Karton
CALSTAND	Wagen für Gebläse	1/Karton

Decken

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ANZAHL
CNOFB2	Erwachsene Ganzkörper	20/Packung
CNOUB2	Erwachsene Oberkörper	24/Packung
CNOLB2	Erwachsene Unterkörper	30/Packung
CNOMA2	Erwachsene Mehrfachzugang	24/Packung
CNOTO2	Erwachsene Rumpf mit dualem Port	30/Packung
CNOCL2	Erwachsene Katheterlabor perforiert	30/Packung
CNUAD2	Erwachsene Unterlegdecke	20/Packung
CNULI2	Erwachsene Lithotomie Unterlegdecke	30/Packung
CNOSA2	Erwachsene Chirurgischer Zugang	20/Packung
CNOPE2	Kinder Ganzkörper	30/Packung
CNUPE2	Kinder Unterlegdecke	24/Packung
CNOPT2	Kinder Schlauch	30/Packung
CNUNN2	Neugeborene Unterlegdecke	30/Packung
CSOCA2	Steril Kardialer Zugang	30/Packung
CSOLB2	Steril Unterkörper Kardial	30/Packung
CSUAD2	Steril Erwachsene Unterlegdecke	20/Packung
CSOSA2	Steril Chirurgischer Zugang	20/Packung
CSOCL2	Steriler Erwachsene Katheterlabor	30/Packung
CSOFB2	Steriler Erwachsene Oberkörper	20/Packung
CSOMA2	Steriler Erwachsene Mehrfachzugang	24/Packung
CSOUB2	Steriler Erwachsene Oberkörper	24/Packung
CSOPE2	Steriler Kinder Ganzkörper	30/Packung
CSOTO2	Steriler Erwachsenerumpf mit dualem port	30/Packung
CSULI2	Sterile Erwachsenen Lithotomie Unterlegdecke	30/Packung
CSUNN2	Steriler Neugeborene Unterlegdecke	30/Packung
CSUPE2	Steriler Kinder Unterlegdecke	24/Packung

WarmTouch™ Decken

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ANZAHL
5030810	Ganzkörperdecke Mehrfachzugang	25/Packung
5030870	Oberkörperdecke	12/Packung
5030900	Rumpfdecke	12/Packung
5030880	Unterkörperdecke	12/Packung
5030860	Kardiologische Decke, steril	12/Packung
5030890	Steril Chirurgischer Zugang	12/Packung
5030850	Pädiatrische Decke für die Chirurgie	12/Packung
5030840	Pädiatrische Ganzkörperdecke	12/Packung

Hinweis: Das Wärmesystem Calima™ wird von Celsius Medical hergestellt und durch Medtronic vertrieben.

1. Matsukawa T, Sessler DI, Sessler, AM, et al. Heat Flow and Distribution during Induction of General Anesthesia. *Anesthesiology*.1995; 82:662-673.

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

© 2022 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Engineering the extraordinary sind Warenzeichen von Medtronic. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens. EMEA-PM-2100122 - 21-weu-calima-brochure-de-6206124