

Compat ella®

Compat Ella® Combiset 1,5 l

Das Compat Ella® Combiset 1,5 l ist für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Medikamenten bestimmt und ist für die Verwendung mit der Compat Ella® Ernährungspumpe geeignet.

Funktionen auf einen Blick

Das Compat Ella® Combiset 1,5 l umfasst einen integrierten 1,5 l Flexibaggle® Behälter, einen ENFit® 3-Wege-Medikamentenport und ein ENFit® distales Ende (patientenseitiger Sondenanschluss).

Zuverlässige Ernährung: Das Compat Ella® Combiset 1,5 l ist mit der patentierten zuverlässigen Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Technologie ausgestattet. AAFF ist in die Kassette integriert und wird immer automatisch aktiviert, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.


Sichere Konnektoren: Das Compat Ella® Combiset 1,5 l umfasst ENFit® Konnektoren, die nach ISO 80369-3 hergestellt werden. Der ENFit® Konnektor ist mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um die Patientensicherheit zu erhöhen, und dabei helfen, versehentliche Fehlanlüsse zu vermeiden.

Praktisch: Der integrierte 1,5-l-Behälter bietet ein praktisches offenes System mit einer eingebauten Aufhängung und einem Schraubverschluss. Die breite obere Füllöffnung ermöglicht das Befüllen des Beutels mit Nahrung oder Wasser, ohne das Ernährungsprogramm zu unterbrechen oder den Behälter aus der Aufhängung zu entnehmen.

Sichere Materialien: Der 1,5-l-Behälter besteht aus Ethylen-Vinylacetat (EVA), einem weichen und lebensmittelfreundlichen Material. Das Compat Ella® Combiset 1,5 l ist steril, DEHP-, BPA- und Latex-frei*.

Kompatibilität:

- Enterale Ernährungssonden: ENFit®
- Spritzen: ENFit®

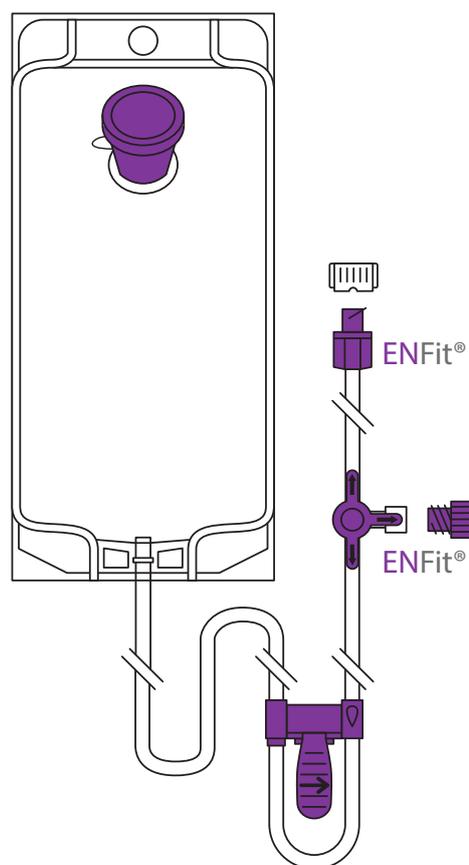


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat Ella® Combiset 1,5 l	12298202	30

Kennen Sie schon Compat Ella®?

Compat Ella® Combiset 1,5 l

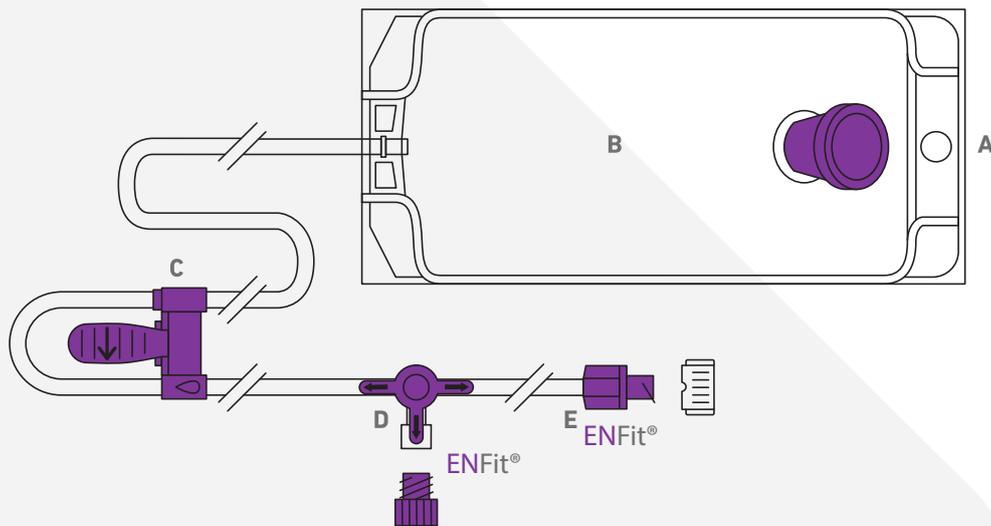

Komponenten

- A Breite obere Füllöffnung mit Aufhängung und Schraubverschluss
- B Flexibag® 1,5-l-Behälter aus EVA mit Graduierungen (bei 50 und 100 ml) und Markierungen für Patientenname und weitere wichtige Informationen (Formel, Flussrate und Datum)
- C Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Sicherheitsfunktion
- D Mit ENFit® kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- E ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

Technische Daten

Steril:	Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung:	Einzelverpackt in Kartons zu je 30 Stück (58,5 x 38,5 x 16 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:	24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
Länge:	Abstand zwischen Beutel und patientenseitigem Sondenanschluss: 230 cm. Abstand zwischen Flexibag® und Pumpe: 50 cm.
Durchmesser:	Nenn-Innendurchmesser: 3,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 4,15 mm.
ISO-Norm:	ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
Klassifizierung:	Klasse IIa.
Rechtmäßiger Hersteller:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
Materialien:	Schlauchsystem: PVC und Silikon. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und Latex-frei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
Herkunftsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.